

## Orthese zur Entlastung der LWS/BWS durch Bewegungseinschränkung in Sagittalebene mit Auf- und Abrüstoption

HMV-Nr. **MKS® Extensa: HMV-Nr. 23.15.04.0004**  
**MKS® Extensa plus: HMV-Nr. 23.15.04.0003**

### Indikationen

- Stabile Wirbelkörperfraktur
- Osteoporose
- Postoperative Stabilisierung

### Merkmale

- Anpassbare, stabile Aluminiumprofile
- Gepolsterte Kunststoffpelotten
- Individueller Gurtverlauf
- Kompressionspolster oberhalb der Beckenkämme
- Einfaches An- und Ablegen durch Klettverschluss
- Alle Stäbe kürzbar

### Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Extensa (plus) basiert auf dem 3-Punkt-Prinzip. Front- und Rückenteil richten die Wirbelsäule auf und entlasten sie damit. Durch gezielte Kompression zwischen Beckenkamm und Thorax (Kirscherneffekt) wird eine zusätzliche Entlastung der Lendenwirbelsäule erreicht.

### Größentabelle und Artikelnummernübersicht

#### MKS® Extensa

Größe	Junior	Bambini
Leibumfang [cm]	60 - 80	50 - 70
Höhe Vorderteil [cm]	maximal 40	maximal 34
Rückenhöhe [cm]	18	14
Art.-Nr.	706D	706E

alle Stäbe kürzbar

#### MKS® Extensa plus

Größe	Junior	Bambini
Leibumfang [cm]	60 - 80	50 - 70
Höhe Vorderteil [cm]	maximal 40	maximal 34
Rückenhöhe [cm]	20	20
Art.-Nr.	711D	711E



LWK 1 bis LWK 5

## Einzelmodule für den modularen Zusammenbau

Teilbezeichnung	Art.-Nr.	Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr.:			
		706E	706D	711E	711D
MKS® Frontstab (30 cm)	223-027-S	•			
MKS® Frontstab (36 cm)	223-028-S		•		
MKS® Rückenstabset (18 cm)	223-100-S			•	•
MKS® Sternalpelotte small	762-081-S	•	•	•	•
MKS® Abdominalplatte small	762-082-S	•	•	•	•
MKS® Symphysenpelotte small	762-083-S	•	•	•	•
MKS® Becken-/Verschlusselement x-small	762-086-S			•	
MKS® Becken-/Verschlusselement small	762-088-S				•
MKS® Abschlussplatte small	762-085-S			•	•
MKS® Extensa/Extensa plus Gurtset small	706-gts	•	•	•	•
MKS® Rückenplatte x-small	762-090-S	•			
MKS® Rückenplatte small	762-091-S		•		

Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.  
 E-Mail: info@albrechtgmbh.com  
 Fax: 08051-961 29 30

# Maßblatt Rumpf

Bestellung       Kostenvoranschlag

Datum: \_\_\_\_\_

Sanitätshaus: \_\_\_\_\_


Kundennummer: \_\_\_\_\_

Orthopädietechniker: \_\_\_\_\_

Patienten ID: \_\_\_\_\_

## Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: \_\_\_\_\_

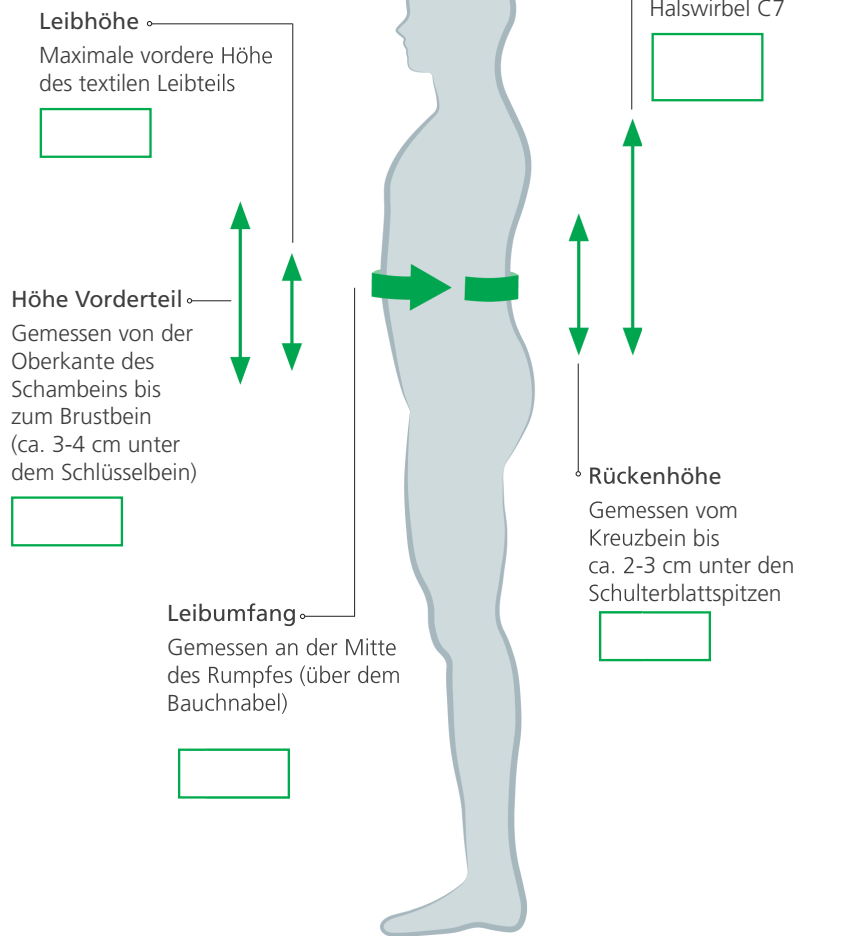

**Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)**

Größenmodifikation

modulare Änderung

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Freigabe: \_\_\_\_\_