

# MKS® Lumbago Vario

## Variable Stabilisierungsothese mit Pelotte sowie Auf- und Abrüstooption


HMV-Nr. 23.14.03.2046

### Indikationen

- Stärkerer Schmerzzustand im LWS-Bereich
- Schwere Lumbalgie
- Rezidivierende Lumbalgie
- Osteochondrose
- Spondylolyse ohne Wirbelgleiten
- Leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten)
- LWS-Syndrom
- Spondylarthrose
- ISG-Reizzustand
- Insuffizienz der Lendenmuskulatur

### Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Rückentasche für Noppenpelotte oder Rückenplatte der MKS® Osteo
- Festes Abdominalteil mit Klettverschluss
- Durch den 3-teiligen Aufbau ist die Bandage individuell an die jeweilige Körperform anpassbar
- Noppenpelotte

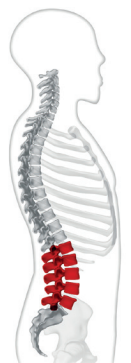

LWK 1 bis LWK 5



Noppenpelotte

### Funktionsweise

Die MKS® Lumbago Vario passt sich durch das teilelastische Bandagenmaterial gut an den Körper an. Durch den aufgebauten zirkulären Druck wird die LWS gestützt. Das feste Verschlusselement sorgt hierbei für den erforderlichen Abdominaldruck. In der Rückentasche befindet sich eine durchblutungsfördernde Noppenpelotte aus weichem Silikon.

### Größen und Artikelnummern

Größe	Standard	Extra
Leibumfang [cm]	70 - 95	95 - 125
vordere Höhe [cm]	18	18
Rückenhöhe [cm]	25	25
Art.-Nr.	581-069-S	581-070-S

### Aufbau

Die MKS® Lumbago Vario setzt sich aus den beiden Seitenteilen (1) und (2), dem Mittelteil (3) und der textilen Abdeckung (4) zusammen. Somit kann die Bandage unterschiedlichen Körperformen angepasst werden. Je nach benötigtem Umfang und gewünschter Form werden die beiden Seitenteile symmetrisch auf das Mittelteil geklettet. Die aufgenähten Markierungen dienen hierbei zur Orientierung.



Bedeutung der Maßangaben siehe Seite 126

# Bedeutung der Maßangaben

