

# CDS® Ellbogenschiene DUO MIT NEUEM GELENK

☎ 00800 03032900

## Ellbogenorthese zur dynamischen Redression in Extension und Flexion

**HMV-Nr.** 23.08.05.1XXX

**Patente** DE 199 04 554 / EP 1 482 881 / US 7,083,583

### Indikationen

- Gelenkkontraktur u. a. infolge:
  - Wachkoma
  - Zerebralparese
  - genetischer Syndrome
  - Epilepsie
  - Spina bifida
  - Beinaheertrinken
  - Verbrennung
  - Schlaganfall
  - Lähmung
  - Schädelhirntrauma
  - Konservativer Therapie von Kapselbandverletzung
  - operativem Eingriff
  - vor und nach Gelenkersatz
  - Arthrose und chronischer Polyarthritis
- Versorgung nach Bizeps-Sehnenruptur
- Zur Prävention erneuter Kontraktur nach Arthrolyse

### Merkmale

- Therapie in Extension und Flexion
- Federkraft individuell einstellbar
- Anschläge in Flexion und Extension in 15°-Schritten einstellbar
- ROM-Bereich und Umschaltwinkel in 10°-Schritten durch 360°-Feature verstellbar
- Arretierfunktion: Einfaches An- und Ablegen der Orthese durch Feststellung des Gelenks in beliebiger Position. Immobilisierung möglich
- Redressionsbereich 160°
- Individuell einstellbares Schalen- und Gurtsystem
- Einfaches Handling und hoher Tragekomfort



### Funktionsweise

Die CDS® Ellbogenschiene DUO basiert auf dem CDS®-Prinzip und dient der gleichzeitigen Behandlung eines Extensions- und Flexionsdefizits des Ellbogengelenks. Durch den kontinuierlichen, wohldosierten Dauerzug stimuliert die Schiene das Wachstum der verletzten Strukturen in die Bewegungsrichtung sowie die Dehnung der verkürzten Strukturen. Der einstellbare Redressionsbereich schützt vor einer schädlichen Überdehnung des Gewebes.

### Größen und Artikelnummern - NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR

Größe	L/L	M/M
<b>Gelenk</b>	CDS® DUO Gelenk	
<b>Schalen</b>	Aluminiumschalen	
<b>Länge am Oberarm medial [cm]*</b>	17 - 21	17 - 20,5
<b>Länge am Unterarm medial [cm]*</b>	20 - 24	19 - 22
<b>Umfang am Oberarm [cm]</b>	28 - 39	20 - 30
<b>Umfang am Unterarm [cm]</b>	22 - 30	18 - 24

#### ohne Handgriff

<b>Art.-Nr. links</b>	905LL-L	905MM-L
<b>Art.-Nr. rechts</b>	905LL-R	905MM-R

#### mit Handgriff

<b>Art.-Nr. links</b>	9051LL-L	9051MM-L
<b>Art.-Nr. rechts</b>	9051LL-R	9051MM-R

\*in Kombination mit dem jeweiligen Schalenset

## Optionales Zubehör

	Breite	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts	
<b>Handgriff L</b>		991L-HL	991L-HR	Einstellbarer Handgriff: Stufenlos justierbare Immobilisierung von 70° Pro- bis 70° Supination
<b>Einstellbarer Handgriff L</b>		993L-HL	993L-HR	
<b>Einstellbare Handauflage L</b>	10 cm	994L-HL	994L-HR	Einstellbare Handauflage: Mit Winkeleinstellung - bewährte Technik aus der CDS® Handgelenkschiene
<b>Einstellbare Handauflage M</b>	8 cm	994M-HL	994M-HR	
<b>Einstellbare Handauflage S</b>	6 cm	994S-HL	994S-HR	
<b>Tragegurt L</b>		580-200-S		
<b>omosan Schultergelenkorthese Verbindungsset</b>		37-7100		

## Einzelmodule für den modularen Zusammenbau

Bei Kombination von Modulen verschiedener Größen empfehlen wir eine Beratung durch albrecht, um die Kompatibilität der Module sicherstellen zu können.

### Schalensets Oberarm


Größe	L/L	M/M	
<b>Umfang am Oberarm [cm]</b>	28 - 39	20 - 30	
<b>Art.-Nr. links</b>	822LL-L	822MM-L	
<b>Art.-Nr. rechts</b>	822LL-R	822MM-R	

### Gelenksets CDS® Ellbogenschiene DUO

Größe	L/L	M/M	
<b>Länge am Oberarm medial [cm]*</b>	17 - 21	17 - 20,5	
<b>Länge am Unterarm medial [cm]*</b>	20 - 24	19 - 22	
<b>Art.-Nr. links</b>	870-185-L	870-185-L	
<b>Art.-Nr. rechts</b>	870-185-R	870-185-R	

\*in Kombination mit dem jeweiligen Schalenset

### Schalensets Unterarm

Größe	L/L	M/M	
<b>Umfang am Unterarm [cm]</b>	22 - 30	18 - 24	
<b>Art.-Nr. links</b>	823LL-L	823MM-L	
<b>Art.-Nr. rechts</b>	823LL-R	823MM-R	

# Maßblatt obere Extremität

Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.  
E-Mail: info@albrechtgmbh.com  
Fax: 08051-961 29 30

Bestellung  Kostenvoranschlag

Datum: \_\_\_\_\_

Sanitätshaus: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Orthopädietechniker: \_\_\_\_\_

Patienten ID: \_\_\_\_\_

## Seite

Links  Rechts

## Produktname

- Elbo-track
- CDS® Ellbogenschiene
- CDS® Ellbogenschiene DUO
- CDS® Sup-Prosan
- CDS® Handgelenkschiene
- CDS® Handgelenkschiene DUO
- CDS® Manusan
- Manusan
- CDS® Kombinationsorthese  
Ellbogen-Hand
- sonstige: \_\_\_\_\_

## Wirkrichtung (bei CDS®)


Ellbogen  Extension  Flexion

Hand  Extension  Flexion

## Für Kinder

### Farbe

- Grün 
- Orange 
- Blau 
- Pink 

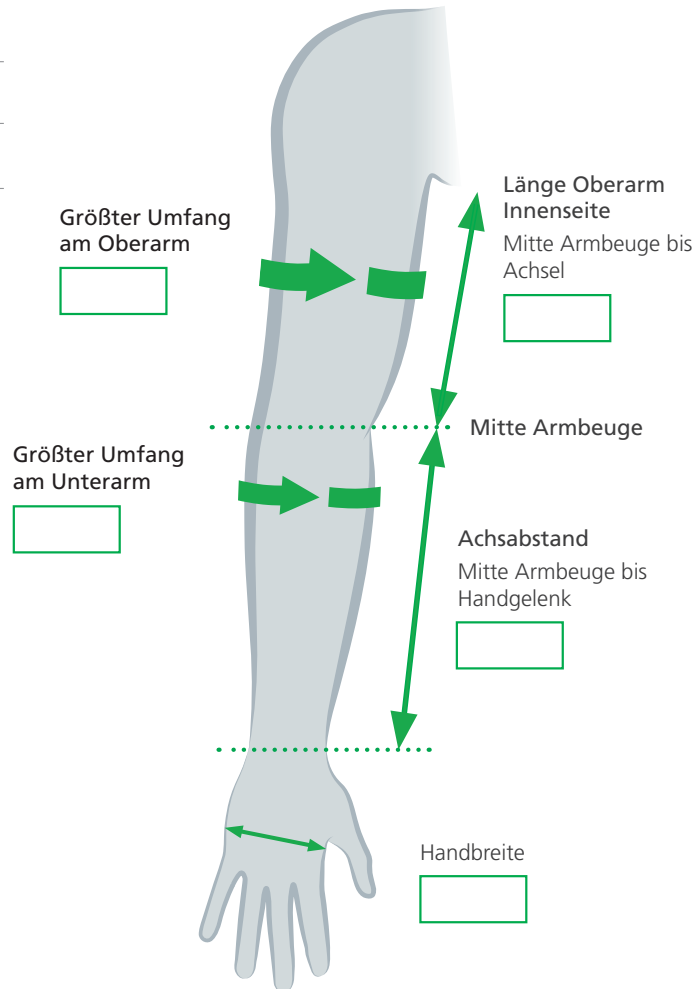

## Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

Freigabe: \_\_\_\_\_