

CDS® Handgelenkschiene DUO MIT NEUEM GELENK

☎ 00800 03032900

Handgelenkorthese zur dynamischen Redression

HMV-Nr. 23.07.04.0XXX

Patente DE 199 04 554 / EP 1 482 881 / US 7,083,583 / DE 10 2015 012 320 / EP 3 146 944

Indikationen

- Gelenkkontraktur u. a. infolge:
 - Wachkoma
 - Zerebralparese
 - genetischer Syndrome
 - Epilepsie
 - Spina bifida
 - Beinaheertrinken
 - Verbrennung
 - Schlaganfall
 - Rückenmarkverletzung
 - Lähmung
 - Schädelhirntrauma
 - Konservativer Therapie von Kapselbandverletzung
 - operativem Eingriff
 - vor und nach Gelenkersatz
 - Arthrose und chronischer Polyarthritits
- Zur Prävention erneuter Kontraktur nach Arthrolyse

Merkmale

- Therapie in Extension und Flexion
- Federkraft individuell einstellbar
- Anschläge in Flexion und Extension in 15°-Schritten einstellbar
- ROM-Bereich und Umschaltpunkt in 10°-Schritten durch 360°-Feature verstellbar
- Arretierfunktion: Einfaches An- und Ablegen der Orthese durch Feststellung des Gelenks in beliebiger Position. Immobilisierung möglich
- Redressionsbereich 160°
- Hoher Tragekomfort durch luftdurchlässige, leichte Aluminium-Schalenelemente und weicher Überzug am Handteil
- Große Flexibilität durch verstellbare, anpassbare Schalenelemente
- Fingerteil ist in Winkeleinstellung dem Behandlungsverlauf individuell anpassbar
- Einfaches Handling durch Schnellverschlüsse am Unterarm



Funktionsweise

Die CDS® Handgelenksschiene DUO basiert auf dem CDS®-Prinzip und dient der gleichzeitigen Behandlung eines Extensionsdefizits und Flexionsdefizits des Handgelenks. Durch den kontinuierlichen, wohldosierten Dauerzug stimuliert die Schiene das Wachstum der verletzten Strukturen in die Bewegungsrichtung sowie die Dehnung der verkürzten Strukturen. Der einstellbare Redressionsbereich schützt vor einer schädlichen Überdehnung des Gewebes.

Größen und Artikelnummern - NEUE GRÖßEN VERFÜGBAR

Größe	L/L	L/M	L/S	M/M
Gelenk	CDS® DUO Gelenk			
Schalen	Aluminiumschalen			
Länge am Unterarm medial [cm]*	21 - 23,5	21 - 23,5	21 - 23,5	17 - 19
Umfang am Unterarm [cm]	22 - 30	18 - 24	14 - 19	18 - 24
Breite Handplatte [cm]	10	8	6	8
Art.-Nr. links	930LL-L	930LM-L	930LS-L	930MM-L
Art.-Nr. rechts	930LL-R	930LM-R	930LS-R	930MM-R

*in Kombination mit dem jeweiligen Schalenset

Optionales Zubehör

	Art.-Nr.
Tragegurt L	580-200-S
Tragegurt S (JUNIOR)	580-210-S
omosan Schultergelenkorthese Verbindungsset	37-7100

Einzelmodule für den modularen Zusammenbau

Bei Kombination von Modulen verschiedener Größen empfehlen wir eine Beratung durch albrecht, um die Kompatibilität der Module sicherstellen zu können.

Schalensets Unterarm Handgelenk



Größe	L/L	L/M	L/S	M/M
Schalen	Aluminiumschalen			
Umfang am Unterarm [cm]	22 - 30	18 - 24	14 - 19	18 - 24
Art.-Nr. links	824LL-L	824LM-L	824LS-L	824MM-L
Art.-Nr. rechts	824LL-R	824LM-R	824LS-R	824MM-R

Schalenset Unterarm XL (24-36cm): 824LXL-L / 824LXL-R
Schalenset Unterarm XXL (28-38cm): 824LXXL-L / 824LXXL-R

Gelenk CDS® Handgelenkschiene DUO



Gelenk	Gelenkset CDS® DUO Gelenk L	Gelenkset CDS® DUO Gelenk M
Verwendung für	L/L, L/M, L/S	M/M
Länge am Unterarm medial [cm]*	21 - 23,5	17 - 19
Art.-Nr. links	870-215-L	870-216-L
Art.-Nr. rechts	870-215-R	870-216-R

*in Kombination mit dem jeweiligen Schalenset

Set Handteil



Größe	L plus*	L	M	S
Breite [cm]	10	10	8	6
Art.-Nr. links	827L-PL	827L-L	827M-L	827S-L
Art.-Nr. rechts	827L-PR	827L-R	827M-R	827S-R

* wie Handteil L, nur mit breiter Fingerauflage

Maßblatt obere Extremität

Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____

Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Seite

Links Rechts

Produktname

- Elbo-track
- CDS® Ellbogenschiene
- CDS® Ellbogenschiene DUO
- CDS® Sup-Prosan
- CDS® Handgelenkschiene
- CDS® Handgelenkschiene DUO
- CDS® Manusan
- Manusan
- CDS® Kombinationsorthese
Ellbogen-Hand
- sonstige: _____

Wirkrichtung (bei CDS®)


Ellbogen Extension Flexion

Hand Extension Flexion

Für Kinder

Farbe

- Grün 
- Blau 
- Orange 
- Pink 

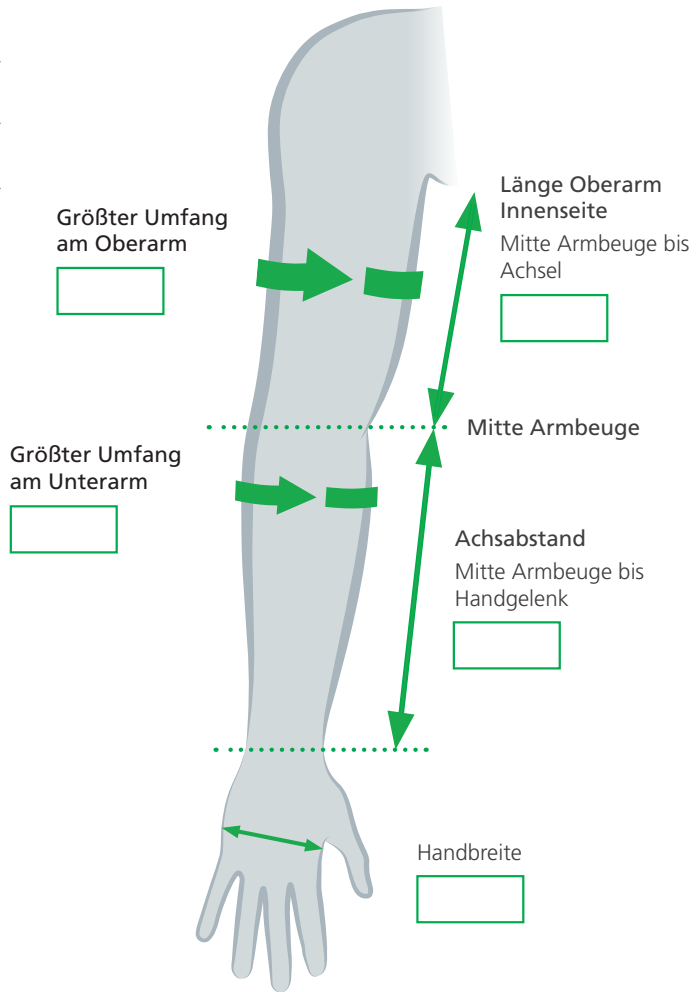

Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____