

# CDS® Kombinationsorthese Ellbogen - Hand

☎ 00800 03032900

## Ellbogen / Handorthese zur dynamischen Redression

<b>HMV-Nr.</b>	23.08.05.1XXX JUNIOR 23.08.05.1XXX
<b>Patente</b>	EP 0 841 044 / US 5,954,677 / EP 3 352 713 / DE 10 2015 012 320 / EP 3 146 344 / weitere Patente angemeldet
<b>Größen</b>	 Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

### Indikationen

- Gelenkkontraktur u. a. infolge:
  - operativem Eingriff
  - konservativer Therapie von Kapselbandverletzung
  - Schlaganfall
  - Lähmung
  - Schädelhirntrauma
  - Verbrennung
  - vor und nach Gelenkersatz
  - Arthrose und chronischer Polyarthritis
- Zur Prävention erneuter Kontraktur nach Arthrolyse
- Spastik nach OP zentrales Nervensystem
- Muskeldystrophie

### Merkmale

- Schnelles, werkzeugloses Trennen oder Verbinden der Elemente durch Coniungi
- Variable Längen Anpassung zwischen Ellbogen und Handgelenk
- Therapie in Extension
- Federkraft individuell einstellbar
- Werkzeugloses Ein- und Ausschalten der Redressionskraft ohne Veränderung der eingestellten Federkraft
- Individuell einstellbares Schalen- und Gurtsystem
- Einfaches Handling und hoher Tragekomfort
- **CDS® Kombinationsorthese Ellbogen - Hand:**
  - Stufenlose Einstellung des Extensionsanschlags von -15° (Hyperextension) bis +30° beim Ellbogengelenk
- **CDS® Kombinationsorthese Ellbogen - Hand Junior mit CDS® Nano Gelenk:**
  - Einstellung des Redressionsbereichs in 10°-Schritten



### Funktionsweise

Die CDS® Kombinationsorthese Ellbogen - Hand basiert auf dem CDS®-Prinzip und dient zur Behandlung eines Extensionsdefizits des Ellbogengelenks und des Handgelenks. Durch den dynamischen Dauerzug stimuliert die Schiene das Wachstum des verkürzten Gewebes. Der stufenlos einstellbare Extensionsanschlag schützt vor einer schädlichen Überdehnung des Gewebes und ermöglicht eine individuelle endgradige Streckung bis -15°.

### Größen und Artikelnummern

Bezeichnung	CDS® Kombinationsorthese Ellbogen-Hand	CDS® Kombinationsorthese Ellbogen-Hand Junior
<b>Gelenk</b>	CDS® Gelenke	CDS® Nano Gelenke
<b>Schalen</b>	Aluminiumschalen	Textilschalen
<b>Art.-Nr. links</b>	981C-L	981CN-L
<b>Art.-Nr. rechts</b>	981C-R	981CN-R

# Maßblatt obere Extremität

Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.  
E-Mail: info@albrechtgmbh.com  
Fax: 08051-961 29 30

Bestellung     Kostenvoranschlag

Datum: \_\_\_\_\_

Sanitätshaus: \_\_\_\_\_

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Orthopädietechniker: \_\_\_\_\_

Patienten ID: \_\_\_\_\_

## Seite

Links     Rechts

## Produktname

- Elbo-track
- CDS® Ellbogenschiene
- CDS® Ellbogenschiene DUO
- CDS® Sup-Prosan
- CDS® Handgelenkschiene
- CDS® Handgelenkschiene DUO
- CDS® Manusan
- Manusan
- CDS® Kombinationsorthese  
Ellbogen-Hand
- sonstige: \_\_\_\_\_

## Wirkrichtung (bei CDS®)

**Ellbogen**     Extension     Flexion

**Hand**     Extension     Flexion

## Für Kinder

### Farbe

- |                                 |   |                               |   |
|---------------------------------|---|-------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Grün   |  | <input type="checkbox"/> Blau |  |
| <input type="checkbox"/> Orange |  | <input type="checkbox"/> Pink |  |

Größter Umfang  
am Oberarm


Größter Umfang  
am Unterarm

Länge Oberarm  
Innenseite  
Mitte Armbeuge bis  
Achsel

Mitte Armbeuge

Achsabstand  
Mitte Armbeuge bis  
Handgelenk

Handbreite

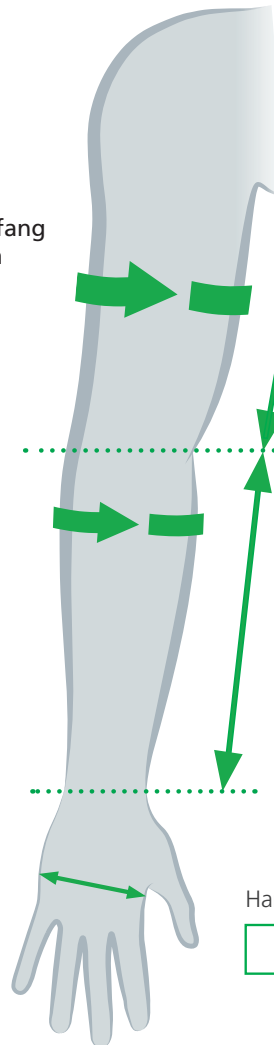

## Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Freigabe: \_\_\_\_\_