


## Orthese zur Entlastung der LWS/BWS durch Bewegungseinschränkung in Sagittalebene mit Auf- und Abrüstoption

**HMV-Nr.** 23.15.04.0003  
JUNIOR 23.15.04.0003

**Größen**  Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

### Indikationen

- Stabile Wirbelkörperfraktur
- Postoperative Stabilisierung
- Osteoporose

### Merkmale

- Anpassbare, stabile Aluminiumprofile
- Gepolsterte Kunststoffpelotten
- Individueller Gurtverlauf
- Kompressionspolster oberhalb der Beckenkämme
- Einstellbare, stabile Rückenplatte
- Einfaches An- und Ablegen durch Clipverschluss



**Optional** kann die Lateralflexion durch die Glutaeusspange zusätzlich eingeschränkt werden.

### Funktionsweise














Die Funktion der MKS® Extensa plus basiert auf dem 3-Punkt-Prinzip. Front- und Rückenteil richten die Wirbelsäule auf und entlasten sie damit. Durch gezielte Kompression zwischen Beckenkamm und Thorax (Kirschkerneffekt) wird eine zusätzliche Entlastung der Lendenwirbelsäule erreicht.



### Größen und Artikelnummern

Größe	S	M	L
Leibumfang [cm]	70 - 125	70 - 125	70 - 125
Höhe Vorderteil [cm]	40 - 47	48 - 53	54 - 59
Rückenhöhe [cm]	27 - 31	27 - 31	33 - 38
Art.-Nr.	711C	711A	711B

Optionaler Frontstab 32 cm – Art.-Nr.: 221-014-S (für Höhe Vorderteil 35 - 40 cm)

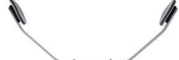Teilebezeichnung	Art.-Nr.	Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 711...			
		S	M	L	
MKS® Frontstab 38 cm	221-015-S	•			
MKS® Frontstab 44 cm	221-016-S		•		
MKS® Frontstab 50 cm	221-017-S			•	
MKS® Rückenstabset 25 cm	221-005-S	•	•		
MKS® Rückenstabset 32 cm	221-006-S			•	
MKS® Sternalpelotte	761-041-S	•	•	•	
MKS® Abdominalplatte	761-042-S	•	•	•	
MKS® Symphysenpelotte	761-043-S	•	•	•	
MKS® Abschlussplatte groß	761-044-S		•	•	
MKS® Becken-/ Verschlusselement	761-046-S	•	•	•	
MKS® Abschlussplatte klein	761-045-S	••	•	•	
MKS® Extensa/ Extensa plus Gurtset	706-gt	•	•	•	
MKS® Glutaeusspange (optional)	771-mp01				

Bei Bestellungen bitte kopieren  
und ausgefüllt senden.  
E-Mail: info@albrechtgmbh.com  
Fax: 08051-961 29 30

# Maßblatt Rumpf

Bestellung  Kostenvoranschlag

Datum: \_\_\_\_\_

Sanitätshaus: \_\_\_\_\_


Kundennummer: \_\_\_\_\_

Orthopädietechniker: \_\_\_\_\_

Patienten ID: \_\_\_\_\_

## Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: \_\_\_\_\_

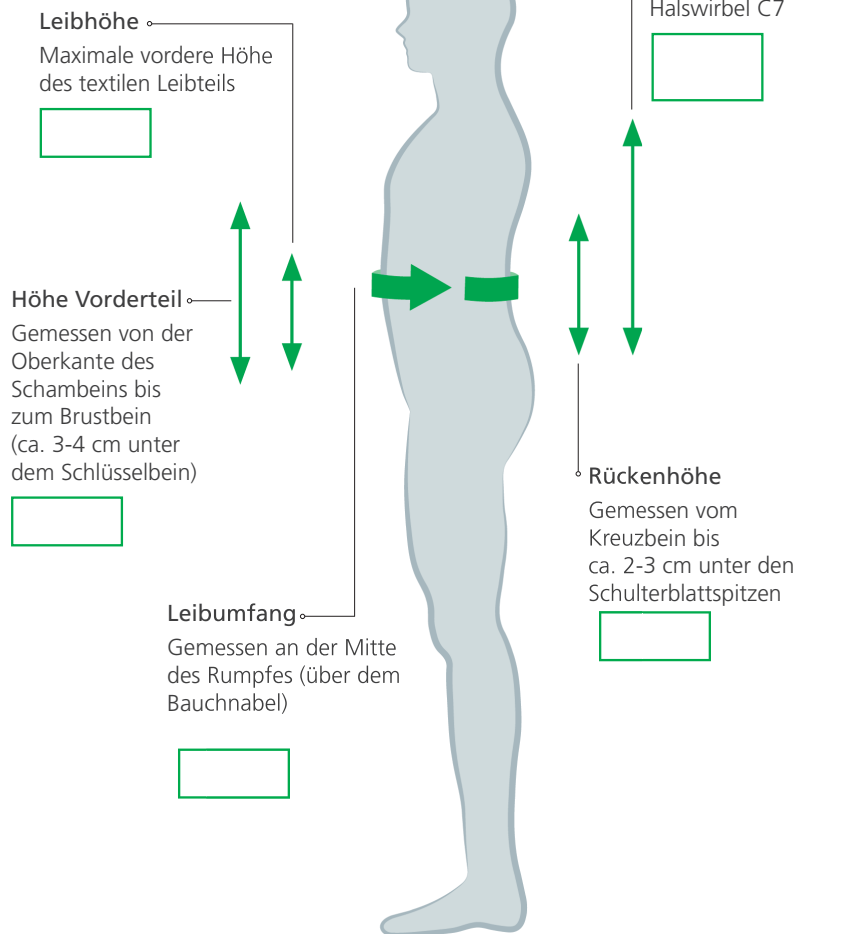

Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

Größenmodifikation

modulare Änderung

Art.-Nr.: \_\_\_\_\_

Freigabe: \_\_\_\_\_