

Orthese zur Entlastung der LWS/BWS durch Bewegungseinschränkung in Sagittalebene mit Auf- und Abrüstopption

HMV-Nr. 23.15.04.0004
JUNIOR 23.15.04.0004

Größen  Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

Indikationen

- Stabile Wirbelkörperfraktur
- Postoperative Stabilisierung
- Osteoporose

Merkmale

- Anpassbare, stabile Aluminiumprofile
- Gepolsterte Kunststoffpelotten
- Individueller Gurtverlauf
- Kompressionspolster oberhalb der Beckenkämme
- Einfaches An- und Ablegen durch Clipverschluss



Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Extensa basiert auf dem 3-Punkt-Prinzip. Front- und Rückenteil richten die Wirbelsäule auf und entlasten sie damit. Durch gezielte Kompression zwischen Beckenkamm und Thorax (Kirschkerneffekt) wird eine zusätzliche Entlastung der Lendenwirbelsäule erreicht.











LWK 1 bis LWK 5

Größen und Artikelnummern

| Größe | S | M | L |
|----------------------|----------|----------|----------|
| Leibumfang [cm] | 70 - 125 | 70 - 125 | 70 - 125 |
| Höhe Vorderteil [cm] | 40 - 47 | 48 - 53 | 54 - 59 |
| Rückenhöhe [cm] | 28 | 28 | 28 |
| Art.-Nr. | 706C | 706A | 706B |

Optionaler Frontstab 32 cm – Art.-Nr.: 221-014-S (für Höhe Vorderteil 35 - 40 cm)

| Teilebezeichnung | Art.-Nr. | Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 706... | | | |
|--|-----------|--|---|---|---|
| | | S | M | L | |
| MKS® Frontstab 38 cm | 221-015-S | • | | |  |
| MKS® Frontstab 44 cm | 221-016-S | | • | |  |
| MKS® Frontstab 50 cm | 221-017-S | | | • |  |
| MKS® Sternalpelotte | 761-041-S | • | • | • |  |
| MKS® Abdominalplatte | 761-042-S | • | • | • |  |
| MKS® Symphysenpelotte | 761-043-S | • | • | • |  |
| MKS® Rückenplatte | 761-049-S | • | • | • |  |
| MKS® Extensa/ Extensa plus Gurtset | 706-gt | • | • | • |  |

Bei Bestellungen bitte kopieren
und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

Maßblatt Rumpf

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____


Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: _____

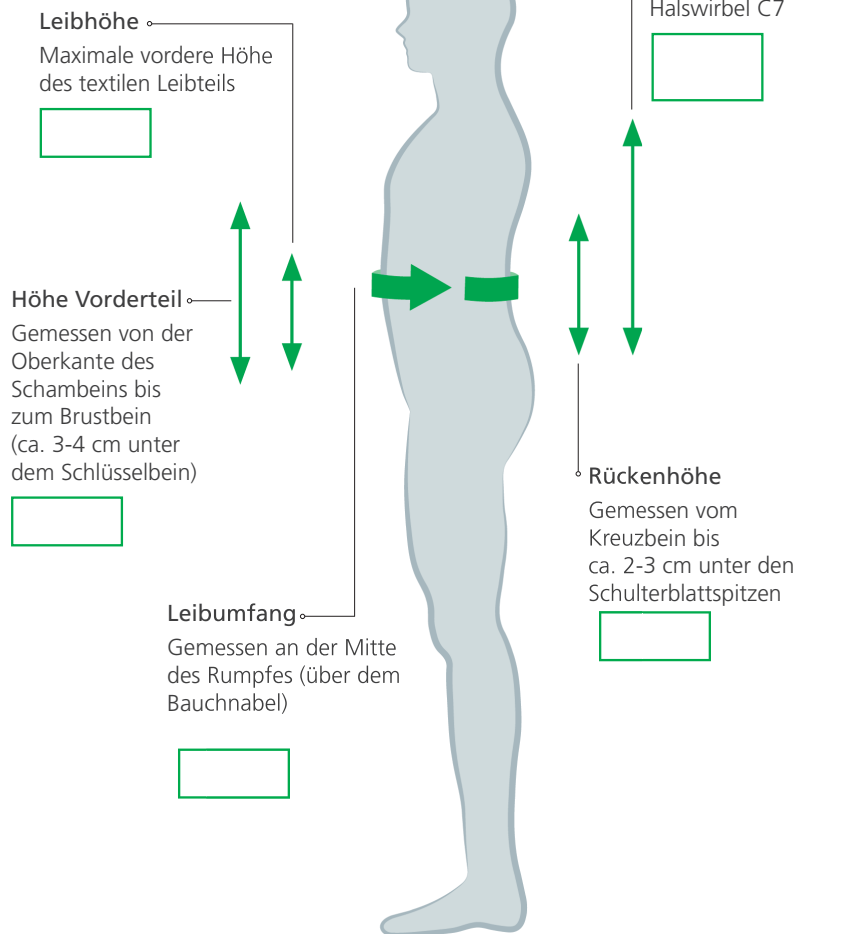

Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____