

Überbrückungsorthese mit stabilem Rahmen und Mobilisierungsfunktion

HMV-Nr. 23.14.02.1XXX

Indikationen

- Schwere Lumboischialgie mit muskulärem Ausfall bei erheblicher Bandscheibenprotrusion/ Prolaps ohne absolute OP-Indikation
- Schweres radikuläres, pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent)
- Spondylolisthese mit rezidivierender Lumboischialgie
- Schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose
- Spinalkanaldekompensation ein-etagig ohne Deformität
- Nach Bandscheiben-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter Bandscheibe
- Bandscheiben-OP ein-etagig
- Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne starke Paresen
- Wirbelfraktur posttraumatisch geringen Ausmaßes
- Pathologische Frakturen, z.B. plasmazytomdrohende Fraktur
- Stabile, konservativ beherrschbare Fraktur

Merkmale

- Stabiler, konturanpassender Überbrückungsrahmen mit Fenster
- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Festes Abdominalteil mit Mikroklettverschluss
- Überbrückungsstäbe aus Federbandstahl herausnehmbar
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Zusätzliche, geteilte, stabile Seitengurtung



BWK 9 bis LWK 5

Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Lumbo fenestra basiert auf dem Überbrückungsprinzip. Das breite Leibteil mit den zusätzlichen, geteilten Seitengurten und dem stabilen, konturanpassenden Überbrückungsrahmen mit Fenster bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet und stabilisiert somit diesen Bereich.

Größen und Artikelnummern

Größe	1	2	3	4	5	6
Leibumfang [cm]	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 105	105 - 120	120 - 135
vordere Höhe [cm]	18	18	18	18	18	18
Rückenhöhe [cm]	32	32	34	34	38	38
Art.-Nr.	790-11	790-21	790-31	790-41	790-51	790-61

Maßblatt Rumpf

Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____


Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: _____

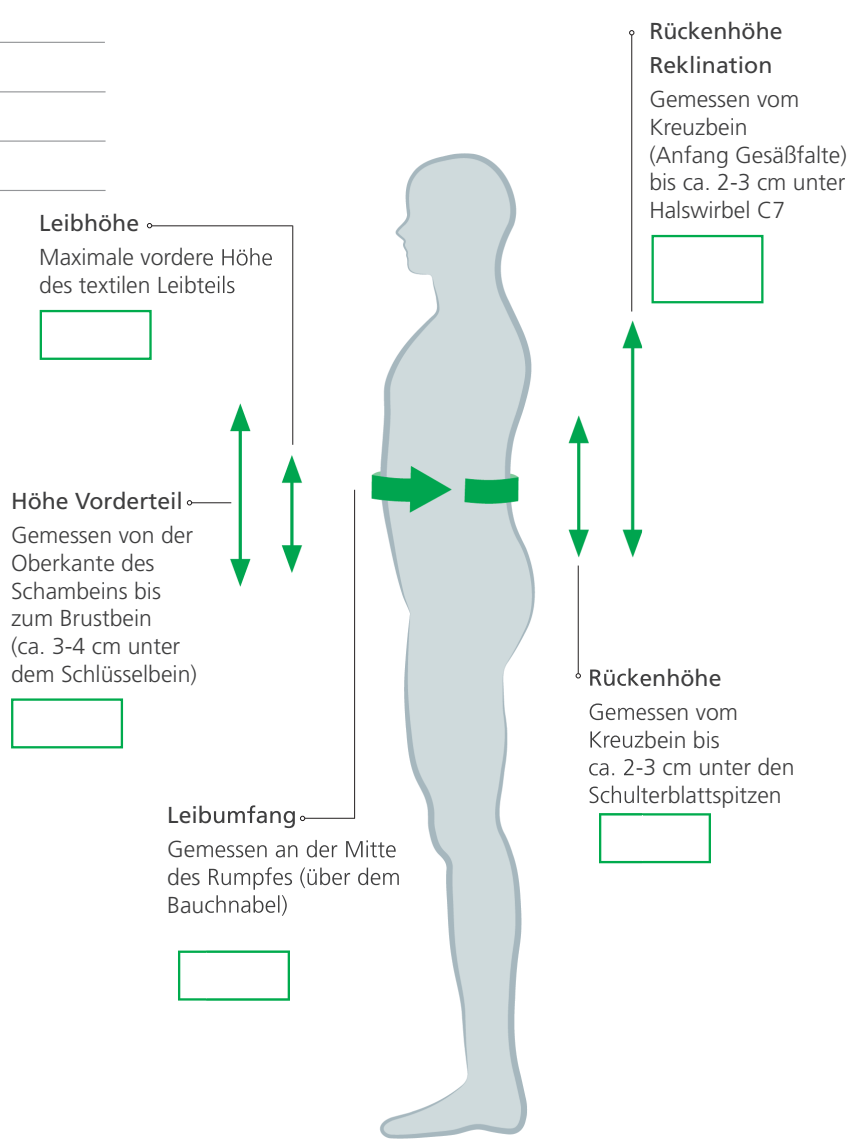

Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

Größenmodifikation

modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____