


Orthese zur aktiven Entlastung und Korrektur der LWS/BWS in Sagittalebene mit Auf- und Abrüstoption

HMV-Nr. 23.15.04.4001
JUNIOR 23.15.04.4001


Größen  Dieses Produkt ist auch in Kindergrößen verfügbar.

Indikationen

- Stabile, osteoporotische und traumatische Wirbelkörperfraktur
- Schmerzen durch Fehlhaltung, z.B. Rundrücken
- Spondylodiscitis
- Tumor
- Nach Bandscheiben-OP
- Muskuläre Insuffizienz
- Spondylitis
- Wirbelvorderkantenfraktur
- Sinterfraktur
- Osteoporose
- Chronische Lumbalgie durch Hyperlordose
- Facettensyndrom
- Degenerative Veränderung der LWS und BWS
- Haltunginsuffizienz
- Hohlrundrücken

Merkmale

- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Mikrolettverschluss
- Anpassbare Rückenplatte mit Aluminiumprofil
- Individueller Gurtverlauf
- Reklinationsgurte

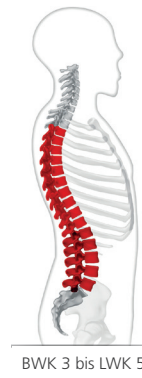

Funktionsweise

Die Funktion der MKS® Osteo basiert auf dem Reklinationsprinzip. Die beiden an der Rückenplatte befestigten Schultergurte richten die Wirbelsäule auf und entlasten dadurch die Brustwirbelsäule. Das breite Leibteil bewirkt eine Entlordosierung der Lendenwirbelsäule und entlastet somit diesen Bereich. Die Reklinationsgurte werden über zusätzliche seitliche Gurte mit dem Leibteil verbunden. Dadurch wird eine Rotationseinschränkung erreicht.

Größen und Artikelnummern

| Größe | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------------|------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|
| Leibumfang [cm] | | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 105 | 105 - 120 | 120 - 135 |
| vordere Höhe [cm] | 18 | | | | | | |
| Rückenhöhe Reklination [cm] | S 46 | 782C-1 | 782C-2 | 782C-3 | 782C-4 | 782C-5 | 782C-6 |
| | M 50 | 782A-1 | 782A-2 | 782A-3 | 782A-4 | 782A-5 | 782A-6 |
| | L 56 | 782B-1 | 782B-2 | 782B-3 | 782B-4 | 782B-5 | 782B-6 |

Reduzierte Höhe

| vordere Höhe [cm] | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 14 | | | | | | | |
| Rückenhöh Reklination [cm] | XS 43 | 782D-1N | 782D-2N | 782D-3N | 782D-4N | 782D-5N | 782D-6N |
| | S 46 | 782C-1N | 782C-2N | 782C-3N | 782C-4N | 782C-5N | 782C-6N |
| | M 50 | 782A-1N | 782A-2N | 782A-3N | 782A-4N | 782A-5N | 782A-6N |
| | L 56 | 782B-1N | 782B-2N | 782B-3N | 782B-4N | 782B-5N | 782B-6N |

Einzelmodule für den modularen Zusammenbau

| Teilbezeichnung | Art.-Nr. | Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 782... | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | C1 | A1 | B1 | C2 | A2 | B2 | C3 | A3 | B3 | C4 | A4 | B4 | C5 | A5 | B5 | C6 | A6 | B6 |
| Rückenplatte mit Reklinationsgurt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S 46 cm | 761-066-S | • | | | • | | | • | | | • | | | • | | | • | | |
| M 50 cm | 761-067-S | | • | | | • | | | • | | | • | | | • | | | • | |
| L 56 cm | 761-068-S | | | • | | | • | | | • | | | • | | | • | | | • |
| Leibteil Gr. 1 60 - 70 cm | 582-001-S | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leibteil Gr. 2 70 - 80 cm | 582-002-S | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| Leibteil Gr. 3 80 - 90 cm | 582-003-S | | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | |
| Leibteil Gr. 4 90 - 105 cm | 582-004-S | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | | |
| Leibteil Gr. 5 105 - 120 cm | 582-005-S | | | | | | | | | | | | | • | • | • | | | |
| Leibteil Gr. 6 120 - 135 cm | 582-006-S | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • |



Reduzierte Höhe

| Teilbezeichnung | Art.-Nr. | Standardmäßig enthalten in den Produkten Art.-Nr. 782... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | D1 | C1 | A1 | B2 | D2 | C2 | A2 | B2 | D3 | C3 | A3 | B3 | D4 | C4 | A4 | B4 | D5 | C5 | A5 | B5 | D6 | C6 | A6 | B6 | |
| Rückenplatte mit Reklinationsgurt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XS 43 cm | 761-065-S | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | • | | | | • | |
| S 46 cm | 761-066-S | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | • | | | • | |
| M 50 cm | 761-067-S | | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | • | | | • | | | • | |
| L 56 cm | 761-068-S | | | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | | • | | | | • | |
| Leibteil Gr. 1 60 - 70 cm | 582-001N-S | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leibteil Gr. 2 70 - 80 cm | 582-002N-S | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leibteil Gr. 3 80 - 90 cm | 582-003N-S | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| Leibteil Gr. 4 90 - 105 cm | 582-004N-S | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| Leibteil Gr. 5 105 - 120 cm | 582-005N-S | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | |
| Leibteil Gr. 6 120 - 135 cm | 582-006N-S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • |



Bei Bestellungen bitte kopieren und ausgefüllt senden.
 E-Mail: info@albrechtgmbh.com
 Fax: 08051-961 29 30

Maßblatt Rumpf

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____

Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: _____

Leibhöhe
 Maximale vordere Höhe des textilen Leibteils

Höhe Vorderteil
 Gemessen von der Oberkante des Schambeins bis zum Brustbein (ca. 3-4 cm unter dem Schlüsselbein)

Leibumfang
 Gemessen an der Mitte des Rumpfes (über dem Bauchnabel)

Rückenhöhe Reklination
 Gemessen vom Kreuzbein bis ca. 2-3 cm unter Halswirbel C7

Rückenhöhe
 Gemessen vom Kreuzbein bis ca. 2-3 cm unter den Schulterblattspitzen



Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____