

Variable Stabilisierungsothese mit Aufrüstoption

HMV-Nr. 23.14.03.0023

Indikationen


- Schmerzzustand im LWS-Bereich
- LWS-Syndrom
- Lumbalgie
- Spondylarthrose
- ISG-Reizzustand
- Insuffizienz der Lendenmuskulatur

Merkmale

- Durch den 3-teiligen Aufbau ist die Bandage individuell an die jeweilige Körperform anpassbar
- Teilelastisches Bandagenmaterial
- Seitliche Verstärkungsstäbe
- Festes Abdominalteil mit Mikroklettverschluss
- Rückentasche für Noppenpelotte oder Rückenplatte der MKS® Osteo

Funktionsweise

Die MKS® Vario passt sich durch das teilelastische Bandagenmaterial gut an den Körper an. Durch den aufgebauten zirkulären Druck wird die LWS gestützt. Das feste Verschlusselement sorgt hierbei für den erforderlichen Abdominaldruck. Optional kann eine durchblutungsfördernde Noppenpelotte oder Rückenplatte in die dafür vorgesehene Rückentasche eingeschoben werden.

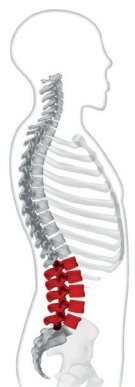

LWK 1 bis LWK 5



Größen und Artikelnummern

Größe	Standard	Extra
Leibumfang [cm]	70 - 95	95 - 125
vordere Höhe [cm]	18	18
Rückenhöhe [cm]	25	25
Art.-Nr.	581-063-S	581-064-S

Optionales Zubehör

	Noppenpelotte
Art.-Nr.	350-014-S

Aufbau

Die MKS® Vario setzt sich aus zwei Seitenteilen, dem Mittelteil und der textilen Abdeckung zusammen. Somit kann die Bandage unterschiedlichen Körperformen angepasst werden. Je nach benötigtem Umfang und gewünschter Form werden die beiden Seitenteile symmetrisch auf das Mittelteil geklettet. Die aufgenähten Markierungen dienen hierbei zur Orientierung.



Maßblatt Rumpf

Bei Bestellungen bitte kopieren
und ausgefüllt senden.
E-Mail: info@albrechtgmbh.com
Fax: 08051-961 29 30

Bestellung Kostenvoranschlag

Datum: _____

Sanitätshaus: _____

Kundennummer: _____

Orthopädietechniker: _____

Patienten ID: _____

Produktname

- MKS® Leibteil
- MKS® Leibteil plus
- MKS® Vario
- MKS® Lumbago
- MKS® Lumbago plus
- MKS® Lumbago Vario
- MKS® Pontsana®
- MKS® Pontsana® plus
- MKS® Pontsana® mobil
- MKS® Pontsana® stabil
- MKS® Osteo
- MKS® Osteo plus
- MKS® Osteo flex
- MKS® Osteo flex plus
- MKS® Lumbo
- MKS® Lumbo forte
- MKS® Lumbo plus
- MKS® Lumbo forte plus
- MKS® Lumbo mobil
- MKS® Lumbo fenestra
- MKS® Extensa
- MKS® Extensa plus
- MKS® Thorecta
- MKS® Thorecta plus
- MKS® Rumpf-Kompressions-Bandage
- sonstige: _____

Leibhöhe
Maximale vordere Höhe
des textilen Leibteils

Höhe Vorderteil
Gemessen von der
Oberkante des
Schambeins bis
zum Brustbein
(ca. 3-4 cm unter
dem Schlüsselbein)

Leibumfang
Gemessen an der Mitte
des Rumpfes (über dem
Bauchnabel)

**Rückenhöhe
Reklination**
Gemessen vom
Kreuzbein
(Anfang Gesäßfalte)
bis ca. 2-3 cm unter
Halswirbel C7

Rückenhöhe
Gemessen vom
Kreuzbein bis
ca. 2-3 cm unter den
Schulterblattspitzen



Technische Umsetzung (von albrecht ausgefüllt)

- Größenmodifikation
- modulare Änderung

Art.-Nr.: _____

Freigabe: _____