
albrecht©
FUNKTIONELLE REHABILITATION

gonasan SPORT OA Knieschiene

Die gonasan SPORT OA Knieschiene entlastet den von Gonarthrose betroffenen Gelenkbereich, stabilisiert das Knie und unterstützt eine natürliche Bewegungsführung. Für mehr Komfort und Aktivität im Alltag.

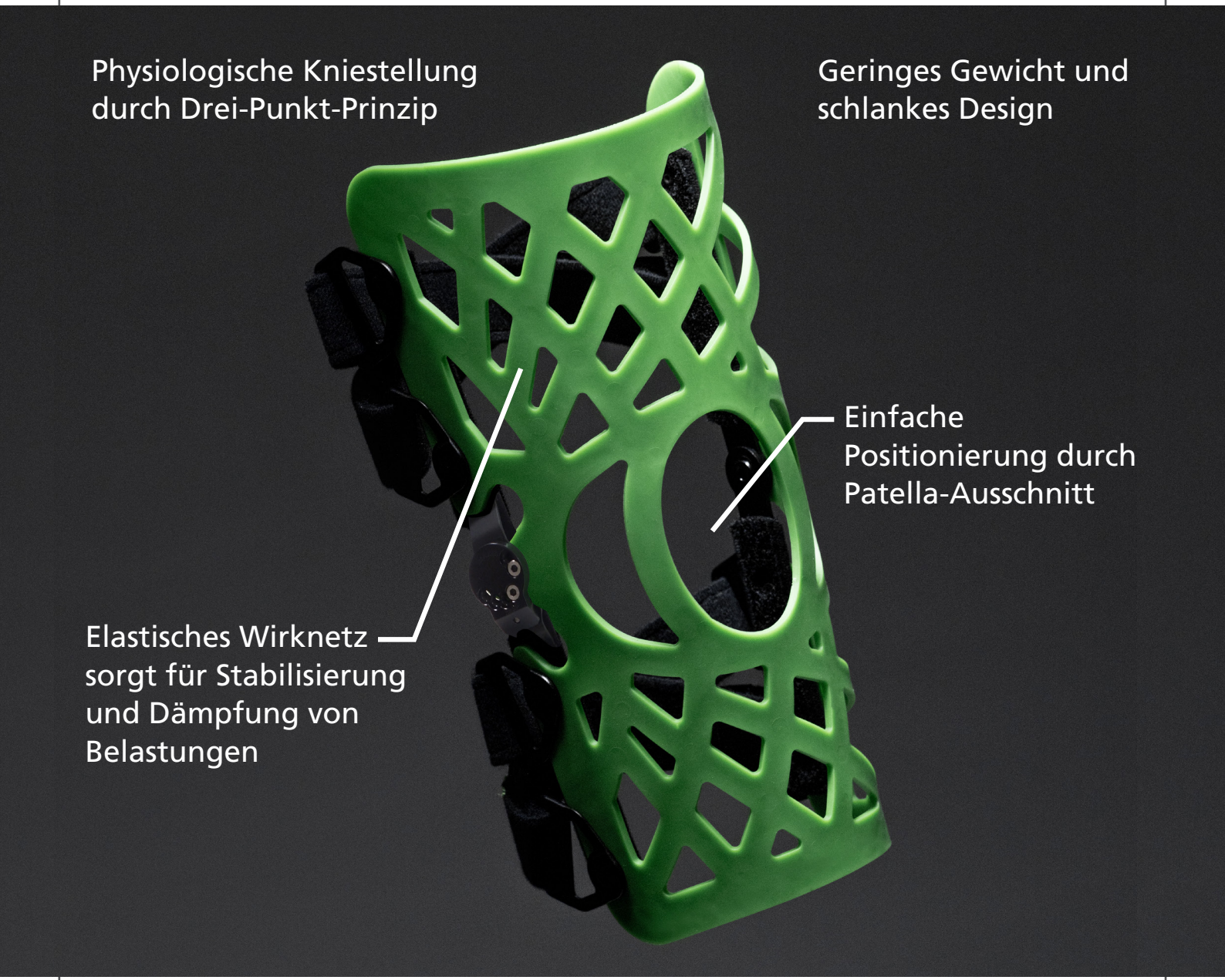

Weitere Informationen

albrecht GmbH • CHIEMSEESTRASSE 81 • D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE
TELEFON: +49 (0) 8051 961 29 - 0 • TELEFAX: +49 (0) 8051 961 29 - 30 • EMAIL: INFO@ALBRECHTGMBH.COM
WWW.ALBRECHTGMBH.COM • INTERNATIONALE SERVICE-HOTLINE: 00800 0 303 29 - 00

MADE IN GERMANY

gonasan SPORT OA Knieschiene

Knie-Orthese zur Entlastung im Drei-Punkt-Prinzip, einstellbar



HMV-Nr. 23.04.04.1XXX

Indikationen

— Beginnende bis mittlere Varusgonarthrose

— Genu varum

— Beginnende bis mittlere Valgusgonathrose

— Genu valgum

— Leichte Knieinstabilität

Merkmale

— Physiologische Kniestellung durch 3-Punkt-Prinzip

— Elastisches Wirknetz sorgt für Stabilisierung und Dämpfung von Belastungen

— Einfache Positionierung durch Patella-Ausschnitt und unelastische Klettverschlüsse

— Extensionslimitierung 0° / 30°

— Flexionslimitierung 30° / 60° / 90° / 120°


— Geringes Gewicht und schlankes Design durch Beschränkung auf funktionale Komponenten

Funktionsweise

Die gonasan SPORT OA Knieschiene ist eine Softorthese, die durch das wirkende 3-Punkt-Prinzip eine Kraftfluss-änderung im Kniegelenk hervorruft. Durch die Lastumverteilung wird eine weitere Reduktion des Kniegelenkspaltes vermieden und der schmerzende Bereich wird entlastet. Durch leichte Kompression des kniegelenkumgebenden Gewebes wird der Anwender unterbewusst an die korrekte Belastung seines Kniegelenks erinnert (Propriozeption). Gleichzeitig wird das Knie in seiner Bewegung stabilisiert, geführt und bei Bedarf limitiert.

Größen und Artikelnummern

Größe	Einheitsgröße	
Umfang am Oberschenkel [cm] (siehe Grafik)	40 - 50	
Umfang am Unterschenkel [cm] (siehe Grafik)	31 - 41	
Art.-Nr. links*	am linken Bein varisierend (lateral entlastend)	400-L
	am rechten Bein valgisierend (medial entlastend)	
Art.-Nr. rechts**	am linken Bein valgisierend (medial entlastend)	400-R
	am rechten Bein varisierend (lateral entlastend)	

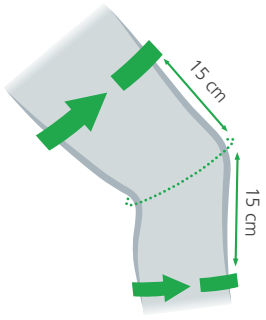

* Eine linke Orthese ist passend für laterale Gonarthrose am linken und für mediale Gonarthrose am rechten Bein
** Eine rechte Orthese ist passend für laterale Gonarthrose am rechten und für mediale Gonarthrose am linken Bein

albrecht GmbH • CHIEMSEESTRASSE 81 • D-83233 BERNAU AM CHIEMSEE
TELEFON: +49 (0) 8051 961 29 - 0 • TELEFAX: +49 (0) 8051 961 29 - 30 • EMAIL: INFO@ALBRECHTGMBH.COM
WWW.ALBRECHTGMBH.COM • INTERNATIONALE SERVICE-HOTLINE: 00800 0 303 29 - 00

MADE IN GERMANY